

TERMOSEAL 320

Precisa, sempre.



12 mm

Banda di saldatura continua

325 mm

Larghezza massima di saldatura

4 kg

Peso

Quando i ritmi si fanno serrati, una sigillatura non corretta comporta sprechi di tempo e materiale, oltre a rappresentare un rischio biologico in contrasto con i protocolli di sterilizzazione. TERMOSEAL 320 riduce il margine di errore: segnala quando la barra è in temperatura, richiama l'operatore se la saldatura supera i 3 secondi e consente il taglio solo a busta sigillata, per kit e strumenti protetti fino all'uso.

USO PROFESSIONALE IN AMBITO ODONTOIATRICO, MEDICO E VETERINARIO

TERMOSEAL 320



PRONTA AL MOMENTO GIUSTO

Il riscaldamento elettronico porta la barra in temperatura e la spia verde lo conferma: finché lampeggia si attende, quando è fissa si procede con la sigillatura. Dopo alcuni minuti di inattività, TERMOSEAL 320 passa automaticamente in stand-by.

TEMPO DI SALDATURA SOTTO CONTROLLO

Nella rapidità del quotidiano, la leva può rimanere abbassata oltre il tempo previsto. Superati i 3 secondi, una spia e un segnale acustico avvisano l'operatore, indicando il momento esatto in cui sollevarla.

PRIMA SI SIGILLA, POI SI TAGLIA

Il cursore di taglio agisce solo a leva abbassata, quindi a saldatura già eseguita. La lama rimane protetta all'interno del carter durante l'utilizzo.


SI USA DA ENTRAMBI I LATI

La leva si aziona dal lato dell'operatore o da quello opposto, con la stessa semplicità. TERMOSEAL 320 si adatta così alla configurazione del piano di lavoro.



DATI TECNICI

Codice	SEAL320
Banda di saldatura	12 mm
Larghezza massima di saldatura	325 mm
Riscaldamento	Elettronico
Materiale sigillabile	Laminato carta/polipropilene
Alimentazione	220-240 V~ / 50-60 Hz
Potenza nominale	100 W
Dimensioni (L x P x A)	460 x 380 x 200 mm
Peso netto	4 kg
Garanzia	24 mesi

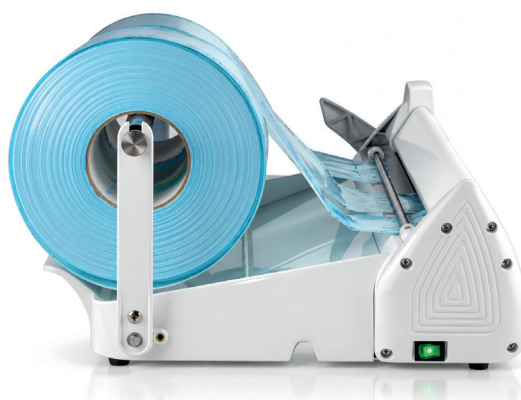

tecnologie medicali

Tecnomed Italia Srl | Via Salvador Allende 2 | 61040 Monte Porzio (PU) | +39 0721 955125 | www.tecnomeditalia.com

Immagini e dati sono indicativi e possono differire dall'attuale stato di omologazione del prodotto. Tecnomed Italia si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso. © Tecnomed Italia srl 2026. Tutti i diritti riservati. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. V.15.00/2026