

LINEE DI ARREDAMENTO MEDICALE

CLINICAL FURNITURE CABINETS



CHIRUNOX

**PERSONALIZZAZIONI INFINITE,
IGIENIZZAZIONE ASSOLUTA**

**ENDLESS CUSTOMIZATIONS,
PERFECT HYGIENE**




L'ambiente di una sala chirurgica necessita di arredi professionali, che consentano una sterilizzazione ottimale delle superfici e un'ottimizzazione dello spazio per semplificare le operazioni di pulizia.

Grazie alle sue caratteristiche specifiche, la linea di mobili Chirunox è la risposta alle esigenze di ogni sala chirurgica ambulatoriale:

- **Inox:** per Chirunox, Tecnomed Italia ha scelto l'acciaio Inox, sinonimo di pulizia, linearità e robustezza.
- **Completamente modulare:** grazie alle innumerevoli varianti e funzionalità a disposizione, progettiamo con il cliente l'arredamento perfetto, che si adatti agli spazi e alle esigenze dello studio o del poliambulatorio.
- **High tech:** grazie agli optional all'avanguardia, potrai rendere la tua composizione iper-tecnologica, mantenendo la massima sterilizzazione.

The operating room needs professional furniture that allows for perfect sterilization of surfaces and also the optimization of space to simplify cleaning operations. Thanks to its specific features, the Chirunox furniture line is the answer to the needs of every operating room:

- **Stainless Steel:** for Chirunox, Tecnomed Italia has chosen the Stainless Steel, synonym with cleanliness, linearity and sturdiness.
- **100% modular:** thanks to the countless variants and functions available, we design with the customer the perfect furniture, which best suits the spaces and the needs of the practice or the clinic.
- **High tech:** thanks to the cutting-edge optional features and accessories, you can make your own super high-tech set-up, while ensuring impeccable sterilization.

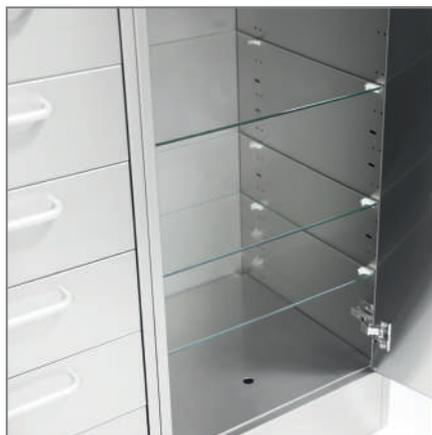

All'interno del mobile con anta sono inseriti tre ripiani in vetro temperato, regolabili in altezza ed estraibili, per garantire una maggior igiene sia dei ripiani stessi che dell'interno del mobile.

Inside the cabinet equipped with door, there are three tempered glass shelves, adjustable in height and removable, to ensure greater hygiene of both the shelves and the inside of the cabinet.



I cassetti sono estraibili, per garantire la massima igiene; sono inoltre dotati di guide scorrevoli e con ammortizzatore integrato, che permette una chiusura lenta e silenziosa.

The drawers are removable to ensure perfect hygiene and are equipped with sliding guides and integrated shock absorbers, for a smooth, silent closing.



I cassetti sono forniti completi di bacinelle di tre tipologie (da 1, 2 e 4 compart) che possono essere inserite indifferentemente nei vari cassetti, a seconda delle esigenze di organizzazione degli strumenti.

The drawers are supplied complete with instrument trays of three types (with 1, 2 and 4 compartments) that can be inserted in the various drawers, according to your organizational needs.



A completamento della configurazione può essere inserito anche il modulo con lavabo a vista, dotato di elettrovalvola.

To complete the configuration, the exposed washbasin module, equipped with a solenoid valve, can also be inserted.



VETRINETTE

GLASS CABINET


Per completare Chirunox, le vetrinette in acciaio Inox sono indispensabili: pratiche e funzionali, facilitano un'organizzazione dello studio ordinata ed efficiente. Tecnomed Italia propone due vetrine, caratterizzate da una solida e robusta struttura in acciaio Inox e dotate di vetri fumé a scorrimento; un ripiano centrale in vetro.

To complete the Chirunox line are Tecnomed Italia's indispensable glass cabinets, which offer practicality and functionality, and facilitate efficient and orderly organization. Two glass cabinets are available, characterized by a solid and sturdy stainless steel structure, and equipped with sliding frosted glass panels and a central glass shelf.

Internamente, le vetrine sono illuminate da una luce soffusa LED blu: questo colore contribuisce a creare un'atmosfera più rilassata per gli operatori e trasmette ai pazienti concetti di igiene e asetticità. È disponibile, inoltre, la versione con un pratico distributore di carta e guanti: questo sistema è stato progettato per ospitare due scatole di guanti e un rotolo di carta ed occupa uno spazio irrisorio, che non incide sulla capacità di stoccaggio del materiale.

From inside, the glass windows are illuminated by soft LED lighting, whose blue colour contributes to creating a more relaxed atmosphere for professional operators while transmitting the comforting sensation of hygiene and sterility to patients.

A model is also available with practical paper roll and glove dispensers. This system has been designed to support two glove boxes and paper roll, while maximizing the space for the storage of other materials.

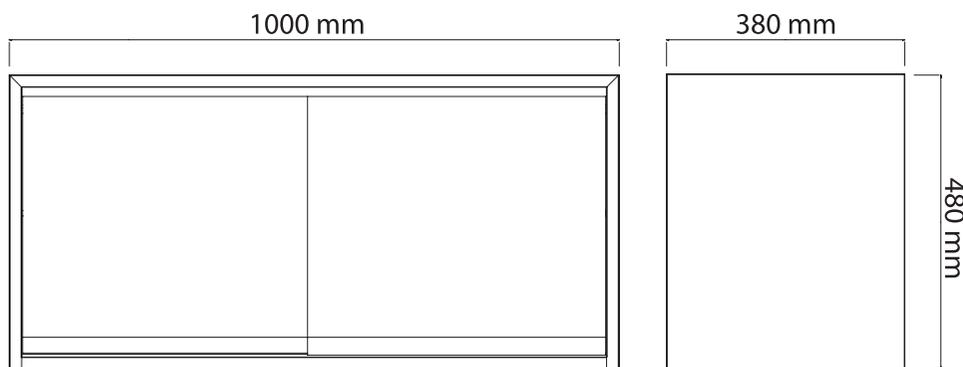

Codice articolo Order code	DE0097X	DE0098X
Materiale Material	Acciaio inossidabile AISI 304 AISI 304 Stainless Steel	Acciaio inossidabile AISI 304 AISI 304 Stainless Steel
Larghezza (mm) Width (mm)	1000	1000
Profondità (mm) Depth (mm)	380	380
Altezza (mm) Height (mm)	480	480
Distributore carta/guanti Paper/glove dispenser		●
Illuminazione led blu Blue LED lighting	Opt	Opt



MATRIX

**LA TECNOLOGIA
DIVENTA SPETTACOLO**

**TECHNOLOGY TURNS
INTO A SHOW**

Durante gli interventi chirurgici, l'equipe operatoria può avere la necessità di visualizzare cartelle cliniche, immagini ed informazioni relative al paziente. Per questo Tecnomed Italia ha ideato Matrix, il mobile con struttura interamente in acciaio Inox, che integra all'interno della sala operatoria monitor e PC: grazie alla connessione Wireless, il PC può essere collegato alla rete dello studio, consentendo al medico un facile accesso alle informazioni necessarie senza costringerlo ad abbandonare la sala operatoria. Matrix può essere completato da altre funzionalità all'avanguardia:

- Motorizzazione per monitor a scomparsa
- Tastiera e Mouse Wireless medicali

Attraverso queste funzionalità high tech sarà possibile conferire al proprio ambulatorio un tocco di alta tecnologia che aiuterà a preservare linearità nelle forme e sterilità nell'utilizzo.

During surgery, the operating team may need to view patient records, images and information. For this reason, Tecnomed Italia has created Matrix, the cabinet with a structure made entirely in Stainless Steel, which integrates the monitor and the PC inside the operating theatre: thanks to the Wireless connection, the PC can be connected to the intranet of the practice, granting the doctor easy access to the necessary information without having to leave the operating theatre. Matrix can be complemented by other cutting-edge features:

- *Concealed monitor motor*
- *Medical wireless keyboard and mouse*

These high-tech features will give your outpatient clinic a touch of cutting-edge technology that will help to keep linear shapes and a sterile workspace.



MOTORIZZAZIONE MONITOR A SCOMPARSA

Il monitor, grazie alla movimentazione motorizzata, viene nascosto all'interno del mobile e può essere sollevato solo in caso di utilizzo.

CONCEALED MONITOR MOTOR

The monitor features a motorized system that allows you to hide it inside of the cabinet and lift it only when you want to use it.



TASTIERA E MOUSE WIRELESS MEDICALI

Matrix può essere utilizzato in totale sicurezza con tastiera e mouse medicali, appositamente progettati per il controllo delle infezioni. Si tratta di apparecchiature facili da pulire e disinfettare. Il mouse è totalmente rivestito da una membrana in silicone bianco resistente ai disinfettanti e lavabile anche per immersione totale. Il rivestimento della tastiera, invece, è amovibile ed autoclavabile. L'assenza totale di spigoli e di fessure di entrambe le apparecchiature evita l'accumulo di sporcizia, la proliferazione di batteri e microbi, e la formazione di biofilm.

MEDICAL WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE


Matrix can be used in total safety with a medical keyboard and mouse, specially designed for infection control. These are devices that are easy to clean and disinfect. The mouse is totally covered by a white silicone membrane resistant to disinfectants and washable even through total immersion. The keyboard cover is removable and autoclavable. The total absence of edges and fissures in both devices avoids the accumulation of dirt, the proliferation of bacteria, microbes and of biofilms.

SCHEDA PRODOTTO

PRODUCT DATA SHEET

Il mobile Matrix può essere composto selezionando gli elementi a seconda delle proprie esigenze

The Matrix cabinet can be set up by selecting the elements that best suit your needs

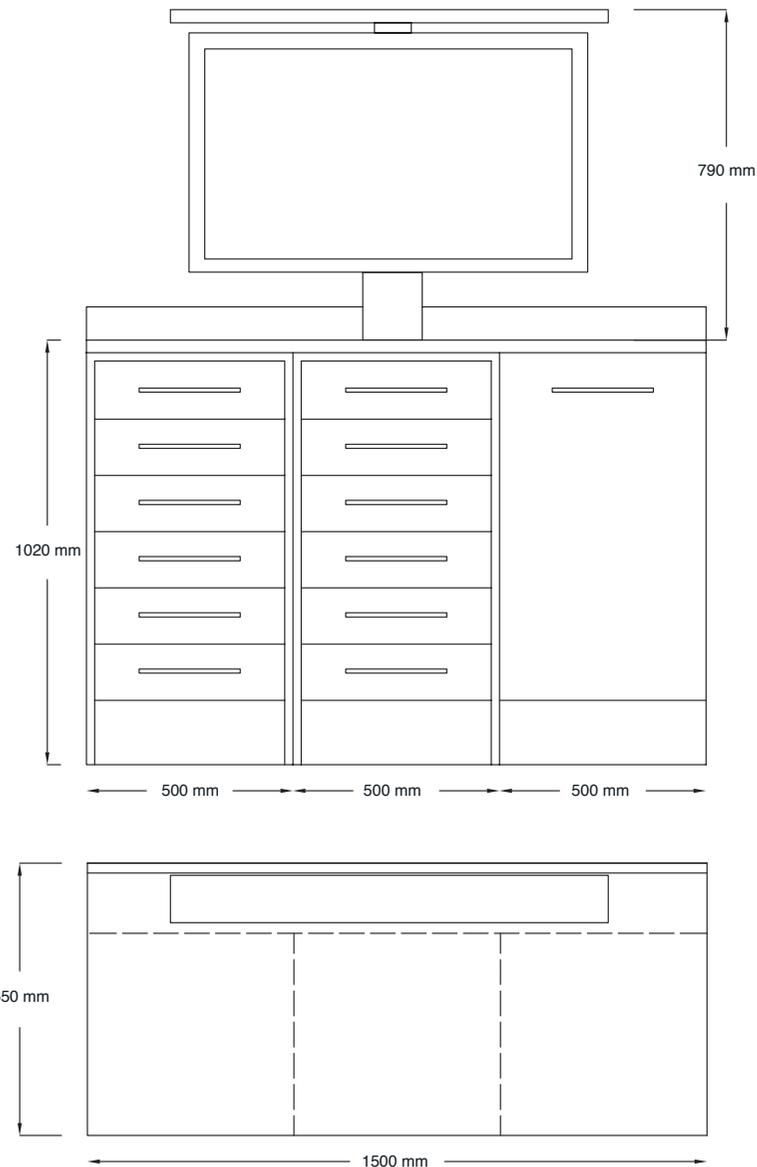

Codice Code	Descrizione Articolo Item Description		
DE9.32X	Componenti fisse Fixed parts	Mobile Inox con anta e 3 ripiani in vetro Stainless steel cabinet, door and 3 glass shelves	●
DE9.38X		Piano Inox da 1500x650x30 mm con alzatina posteriore Stainless steel top, 1500x650x30 mm with high rear splash guard	●
DE9.31X + DE9.32X	Moduli a scelta tra: Elements to choose between:	Mobile Inox con 6 cassetti + Mobile Inox con anta e 3 ripiani in vetro Stainless steel cabinet, 6 drawers + Stainless steel cabinet, door and 3 glass shelves	Opt*
DE9.31X + DE9.31X		2 mobili Inox con 6 cassetti 2 stainless steel cabinets, 6 drawers	Opt*
DE9.32X + DE9.32X		2 mobili Inox con anta e 3 ripiani in vetro 2 stainless steel cabinets, door and 3 glass shelves	Opt*
DE1004.5	Elementi Hi-Tech: Hi-Tech elements:	Motorizzazione per Monitor o Smart TV a scomparsa (max. 43") Motor for hideaway Monitor or Smart TV (43" max.)	Opt
DE1004X		Monitor 42" con box PC WiFi e Bluetooth 42" monitor with WiFi and Bluetooth PC box	Opt
DE1004.5SO		Tastiera medicale wireless Medical wireless keyboard	Opt
DE1004.6SO		Mouse medicale wireless Medical wireless Mouse	Opt

Legenda: ● -> di serie // Opt -> optional
* Scelta obbligatoria di almeno un optional

Legend: ● -> standard // Opt -> optional
* Mandatory choice of at least one option



STERILA

**INTEGRAZIONE PERFETTA
TRA TECNOLOGIA E STERILIZZAZIONE**

***PERFECT FUSION BETWEEN
TECHNOLOGY AND STERILIZATION***

Molti ambulatori non hanno a disposizione una zona lavamani pre-intervento posizionato all'esterno della sala; in questi casi è necessario inserire il lavabo all'interno dell'ambiente operatorio. Questo implica però un alto rischio di contaminazione e la necessità di disinfezione continua.

Per questo abbiamo ideato Sterila, un mobile capace di integrare il lavabo nella zona chirurgica mantenendo un altissimo livello di igienizzazione.

Grazie ad un sistema high-tech patent pending, la lampada ultravioletti con tecnologia UV-C inserita all'interno di Sterila, è un'innovazione senza precedenti: il mobile è in grado di effettuare cicli automatici di sterilizzazione di giorno, mantenendo bassa la carica batterica, per poi annientarla la notte, con un ciclo intensivo.

Il coperchio di cui è dotato Sterila, ne aumenta ulteriormente le funzionalità: alla chiusura esso si trasforma in un comodo piano di lavoro e la lampada entra in funzione in totale sicurezza.

Many outpatient clinics lack a dedicated area for pre-operative hand disinfection, outside the operating room; in these cases, it is necessary to insert the washbasin inside the operating room. However, this implies a high risk of contamination and the need for continuous disinfection.

This is why we have created Sterila, a cabinet that integrates the washbasin into the surgical area, while maintaining a very high level of hygiene.

Thanks to a high-tech patent pending system, the ultraviolet lamp with UV-C technology integrated into Sterila is an unprecedented innovation: the cabinet is able to carry out automatic sterilization during the day, keeping the bacterial load low, and then annihilating it over night, via an intensive sterilization cycle.

The Sterila lid further increases its functionality: when it closes, it turns into a comfortable worktop and the lamp works in total safety.



La lampada germicida di Sterila, grazie al processo fisico della luce ultravioletta di tipo UV-C, è efficace contro una grandissima quantità di virus, batteri e altri microorganismi: per un trattamento pari all'abbattimento del 99,9% dei batteri, basta pochissimo tempo. La lampada entra in azione automaticamente solo a completa chiusura del coperchio.

The germicidal lamp of Sterila, thanks to the physical process of UV-C ultraviolet light, is effective against a wide range of viruses, bacteria and other microorganisms: a treatment able to eliminate 99.9% of bacteria, takes very little time. The lamp is activated automatically only when the lid is completely closed.



L'erogazione dell'acqua viene attivata dall'interruttore a pedale.

The water is activated by the foot switch.



Il rubinetto può eseguire molteplici movimenti: abbassato completamente, permette la chiusura del coperchio; ruotando di 360° consente al raggio d'acqua di arrivare in ogni angolo per facilitare le operazioni di pulizia.

The tap can perform multiple movements: when all down, it closes the lid; when turned by 360°, it allows the water jet to reach every corner to facilitate cleaning operations.





La zona di lavaggio, una volta chiusa, fornisce un ulteriore piano di lavoro aumentando così l'area a disposizione.

The washing area, once closed, provides an additional work surface, thus increasing the available area.

SCHEDA PRODOTTO

PRODUCT DATA SHEET

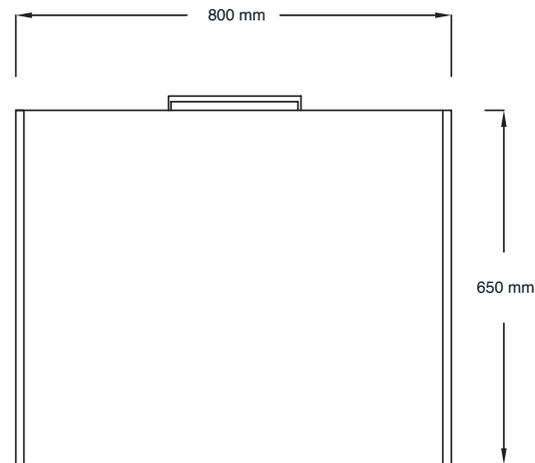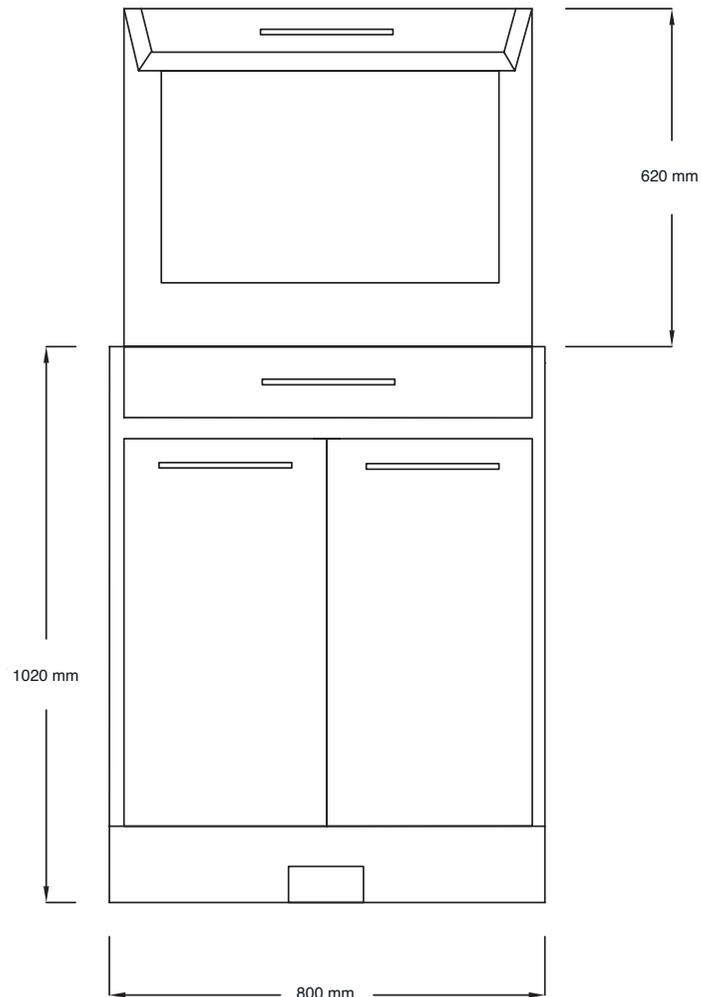

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza: 460 Watt
Tensione: 230 Vac
Pressione massima acqua: 3 bar

Lavabo Inox a scomparsa dim. 500x650x1020 mm (lpxh), con sterilizzazione uvc ed elettrovalvole

Codice articolo: WASHCH-3

Lavabo Inox a scomparsa dim. 800x650x1020 mm (lpxh), con sterilizzazione uvc ed elettrovalvole

Codice articolo: WASHCH-380

Lavabo Inox a scomparsa dim. 500x475x900 mm (lpxh), con sterilizzazione uvc ed elettrovalvole

Codice articolo: WASHCH-4

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power: 460 Watt
Voltage: 230 Vac
Maximum water pressure: 3 bar

Recessed stainless steel washbasin, 500x650x1020(lpxh)mm (lpxh), with UVC sterilisation and solenoid valves

Order code: WASHCH-3

Recessed stainless steel washbasin, 800x650x1020mm (lpxh), with UVC sterilisation and solenoid valves

Order code: WASHCH-380

Recessed stainless steel washbasin, 500x475x900 mm (lpxh), with UVC sterilisation and solenoid valves

Order code: WASHCH-4

...ED ORA COMPONI IL TUO CHIRUNOX

...AND NOW, SET UP YOUR OWN CHIRUNOX CABINET!

Ecco alcuni esempi!


Here are a few examples!




MOBILI COMPONENTI - ALTEZZA 1020 (COME MOBILI MAYCART E ASPIROL)

MODULAR CABINETS - HEIGHT 1020 (SAME AS MAYCART AND ASPIROL CABINETS)


MOBILE INOX CON ANTA E 3 RIPIANI IN VETRO STAINLESS STEEL CABINET, DOOR AND 3 GLASS SHELVES

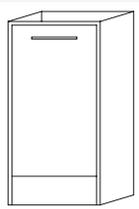	Codice articolo Order code	Larghezza (mm) Width (mm)	Profondità (mm) Depth (mm)	Altezza (mm) Height (mm)
		DE9.32X	500	480

MOBILE INOX CON 6 CASSETTI STAINLESS STEEL CABINET, 6 DRAWERS

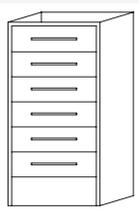	Codice articolo Order code	Larghezza (mm) Width (mm)	Profondità (mm) Depth (mm)	Altezza (mm) Height (mm)
		DE9.31X	500	480


LAVABO INOX A SCOMPARSA RECESSED STAINLESS STEEL WASHBASIN

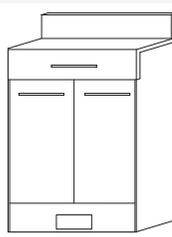	Codice articolo Order code	Larghezza (mm) Width (mm)	Profondità (mm) Depth (mm)	Altezza (mm) Height (mm)
	WASHCH-3	500	650	1020
	WASHCH-380	800	650	1020

TOP MOBILI CABINET WORKTOPS

	Codice articolo Order code	Larghezza (mm) Width (mm)	Profondità (mm) Depth (mm)	Altezza (mm) Height (mm)
	DE9.33.50X	1000	500	30
DE9.33.65X	1000	650	30	
DE9.38X	1500	500	30	
DE9.38.65X	1500	650	30	
DE9.35X	2000	500	30	
DE9.35.65X	2000	650	30	

VETRINETTA GLASS CABINET

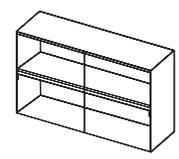	Codice articolo Order code	Larghezza (mm) Width (mm)	Profondità (mm) Depth (mm)	Altezza (mm) Height (mm)	Distributore carta/guanti Paper/glove dispenser
	DE0097X	1000	380	480	
	DE0098X	1000	380	480	●
DE987ILX	Kit illuminazione luce led blu per vetrine 24vdc Blue LED lighting for glass cabinets - 24vdc				

MOBILI COMPONENTI - ALTEZZA 900


(ALTEZZA STANDARD)

MODULAR CABINETS - HEIGHT 900

(STANDARD HEIGHT)


MOBILE INOX CON ANTA E 3 RIPIANI IN VETRO

STAINLESS STEEL CABINET, DOOR AND 3 GLASS SHELVES

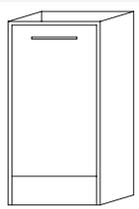	Codice articolo Order code	Larghezza (mm) Width (mm)	Profondità (mm) Depth (mm)	Altezza (mm) Height (mm)
	DE9.37X	500	480	900

MOBILE INOX CON 6 CASSETTI

STAINLESS STEEL CABINET, 6 DRAWERS

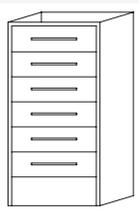	Codice articolo Order code	Larghezza (mm) Width (mm)	Profondità (mm) Depth (mm)	Altezza (mm) Height (mm)
	DE9.36X	500	480	900


LAVABO INOX A SCOMPARSA

RECESSED STAINLESS STEEL WASHBASIN

	Codice articolo Order code	Larghezza (mm) Width (mm)	Profondità (mm) Depth (mm)	Altezza (mm) Height (mm)
	WASHCH-4	500	480	900


LAVABO INOX A VISTA

RECESSED STAINLESS STEEL WASHBASIN

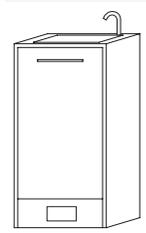	Codice articolo Order code	Larghezza (mm) Width (mm)	Profondità (mm) Depth (mm)	Altezza (mm) Height (mm)
	WASHCH-ST	500	480	900

TOP MOBILI

CABINET WORKTOPS

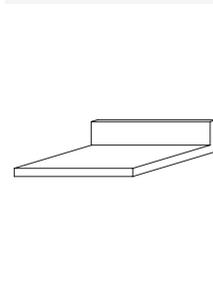	Codice articolo Order code	Larghezza (mm) Width (mm)	Profondità (mm) Depth (mm)	Altezza (mm) Height (mm)
	DE9.33.50X	1000	500	30
	DE9.38X	1500	500	30
	DE9.35X	2000	500	30

VETRINETTA

GLASS CABINET

	Codice articolo Order code	Larghezza (mm) Width (mm)	Profondità (mm) Depth (mm)	Altezza (mm) Height (mm)	Distributore carta/guanti Paper/glove dispenser
	DE0097X	1000	380	480	
	DE0098X	1000	380	480	●
	DE987ILX	Kit illuminazione luce led blu per vetrine 24vdc Blue LED lighting for glass cabinets - 24vdc			

STANDARD SET



ORGANIZZA AL MEGLIO IL TUO LAVORO

ORGANIZE YOUR WORK FOR MAXIMUM PRODUCTIVITY


A completamento della sala chirurgica, Handy Surgery ha previsto anche una linea di mobili, elementi mobili e accessori standard, indispensabili per organizzare il lavoro e la disposizione dei materiali al meglio. Tutti gli elementi mantengono gli standard della linea: la pulizia dell'acciaio Inox unita allo stile moderno e professionale, rendono anche questi complementi unici ed efficienti.

To complete the surgical room, Handy Surgery has also planned a line of cabinets, mobile elements and standard accessories, indispensable for organizing the work and the materials in the best possible way. All the elements meet the standards of the line: the cleanliness of the Stainless Steel merged with the modern and professional style, make these accessories unique and efficient as well.

VETRINA FARMACEUTICA PHARMACEUTICAL SHOWCASE

In un ambulatorio è sempre necessario mantenere una buona organizzazione e gestione dei farmaci all'interno di una vetrina farmaceutica essenziale e pratica. La vetrina farmaceutica di Handy Surgery è dotata di una struttura solida e robusta in acciaio inox, con porte in vetro per una consultazione immediata delle scorte. I quattro ripiani, regolabili in altezza, facilitano la ricerca dei farmaci, permettendo di reperirli in modo pratico e rapido.

In an outpatient clinic, you must always ensure a good organization and management of medications within a compact and practical pharmaceutical showcase. Handy Surgery's pharmaceutical showcase is equipped with a solid and sturdy Stainless Steel structure, with glass doors for an immediate check of the stock available. The four height-adjustable shelves allow you to find the medications quickly and easily.

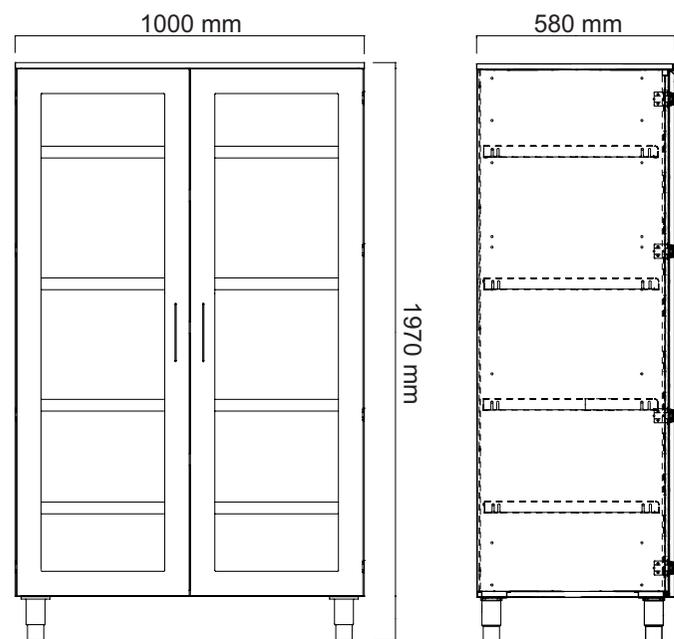

Codice articolo	TM5020SM
Order code	
Materiale <i>Material</i>	Acciaio inossidabile AISI 304 <i>AISI 304 Stainless Steel</i>
Larghezza (mm) <i>Width (mm)</i>	1000
Profondità (mm) <i>Depth (mm)</i>	580
Altezza (mm) <i>Height (mm)</i>	1970



LAVABI INDIPENDENTI

STANDALONE WASHBASINS

Per le strutture che hanno a disposizione una zona lavamani esterna alla sala chirurgica, è possibile inserire un comodo lavabo indipendente, dove il chirurgo e l'equipe medica si preparano per l'intervento. Dato il suo particolare utilizzo, è dotato di tutti quegli accorgimenti atti a preservare l'utilizzatore da ogni contaminazione, riducendo al minimo il contatto. I lavabi della linea Handy Surgery sono costruiti interamente in acciaio Inox con finitura scotch brite e dotati di parete antispruzzo, spigoli arrotondati e bordi con doppia piega anti-taglio. Sono completi di miscelatori a leva clinica e dispenser di sapone, anche quest'ultimo interamente in acciaio Inox. Disponibili in due varianti, con lavabo singolo o doppio.


For clinics that have a hand-disinfection area outside the surgical room, it is possible to insert a comfortable standalone washbasin, where the surgeon and the medical team prepare for the operation. Given its particular use, the washbasin features all the functions required to protect the user from any contamination, by minimizing contact. The washbasins of the Handy Surgery line are made entirely of Stainless Steel with a Scotch Brite finish and are equipped with a splash-proof wall, rounded edges and a double fold to prevent cuts. They are complete with medical lever mixers and soap dispensers, the latter is also made entirely of Stainless Steel. There are two versions available: with single or double washbasin.



Dispenser di sapone in acciaio inox.
Stainless Steel soap dispenser.

SCHEDA PRODOTTO


PRODUCT DATA SHEET

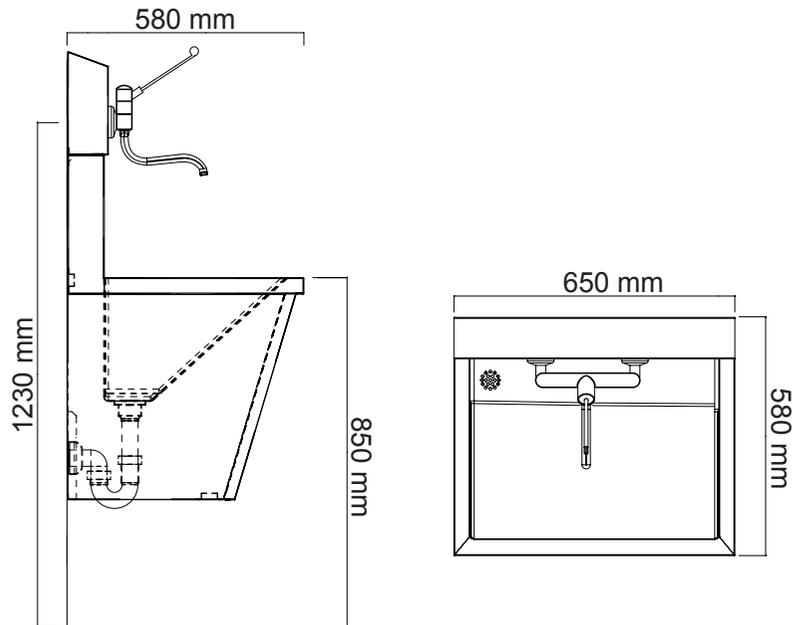

Lavabo singolo Inox con miscelatore a leva chirurgica e dispenser sapone.
Codice articolo: WASHCH-1

Single washbasin in stainless steel with surgical lever-operated mixer tap and soap dispenser.

Order code: WASHCH-1

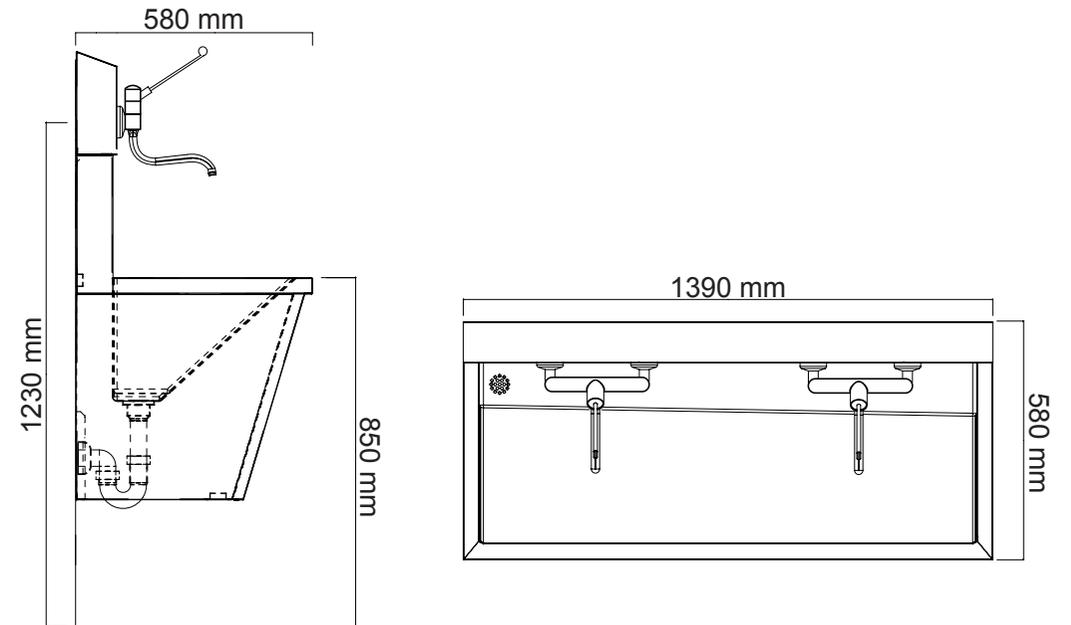

Lavabo doppio Inox con miscelatore a leva chirurgica e dispenser sapone.
Codice articolo: WASHCH-2

Double washbasin in stainless steel with surgical lever-operated mixer tap and soap dispenser

Order code: WASHCH-2



EASYMOVE

ARMONIA IN MOVIMENTO

HARMONY MOVEMENT

Ogni professionista ha esigenze operative differenti, che richiedono una predisposizione dell'ambiente che sia funzionale ma allo stesso tempo accogliente per i propri pazienti, assicurando a questi ultimi un impatto visivo che renda migliore la qualità dell'esperienza odontoiatrica. Con il nuovo concept Handy Surgery - Soft Line dinamismo e ordine sono assicurati: gli elementi mobili consentono il massimo dell'organizzazione e della flessibilità, adattandosi di fatto a tutti gli studi con varie tipologie di servizi. I mobili sono realizzati con lamiera elettrozincata (Colore RAL9010), omogenea e robusta grazie ad uno spessore 10/10. I frontali di tutti i componenti e le maniglie sono verniciati a polveri epossidiche antibatteriche.

Every professional has different operational needs, which require an environment that is functional but, at the same time, welcoming for patients that ensures they benefit from a visual impact that improves the quality of their dental practice experience. With the new Handy Surgery - Soft Line concept, dynamism and order are assured: the mobile elements allow maximum organisation and flexibility, actually adapting to each and every practice with a range of possible options. The furniture units are made of zinc-electroplated metal sheet (RAL9010 colour) that is uniform and robust thanks to a 10/10 thickness. The fronts of all the components and handles are painted with antibacterial epoxy powders.



L'elemento lavello, con vasca in ceramica a filo piano, è compreso di top in laminato idrorepellente antigraffio. È possibile scegliere la posizione del lavello e la lunghezza del top (1,5 o 2 metri) in base alle proprie esigenze operative.

The washbasin module is equipped with Worktop in scratch-proof, water-repellent laminate and is supplied with wire ceramic sink. You can choose the position of the sink and the length of the top (1.5 or 2 metres) according to your operational needs.



Il lavello è dotato di miscelatore con leva clinica per la regolazione della temperatura dell'acqua, e di comando elettrico a pedale per l'erogazione.

The wash basin is equipped with a medical lever mixers, to adjust the water temperature, and electric water supply foot pedal.



Le maniglie, in alluminio anodizzato, sono personalizzabili in otto colori.

The handles are in anodised aluminium and there is a choice of eight colours



I cassetti, montati su guide con cuscinetti in teflon, hanno un elevato grado di scorrevolezza e sono dotati di bacinelle in tecnopolimero, lisce o a scomparti, resistenti all'usura e all'invecchiamento.

The drawers, mounted on guides with Teflon bearings, offer effortless sliding and are equipped with technopolymer trays, either with or without compartments, that are resistant to wear and ageing.



Con le innumerevoli varianti e funzionalità dei mobili Soft Line, progettiamo con il medico professionista l'arredamento perfetto, che si adatti agli spazi a disposizione: la componibilità e l'organizzazione dello spazio sono inoltre studiate per rispondere alle esigenze cliniche e percettive del paziente.

L'aspetto di questi complementi d'arredo è lineare e semplice: con una linea sobria e compatta, contribuisce alla realizzazione di un ambiente pulito, accogliente ed esteticamente piacevole.

With the countless variations and functionalities of Soft Line furniture, we design the perfect furniture solution alongside the medical professional, adapting it to the spaces available: the modularity and organisation of the space are also designed to meet the clinical needs and those of the patient.

These pieces have a linear and modest style: with a simple and compact line, it contributes to the creation of a clean, welcoming and aesthetically pleasing atmosphere.



Tutto ciò che serve viene messo a disposizione degli operatori in modo funzionale: all'interno di ogni modulo tutto il materiale viene predisposto ed ordinato.

Everything the operators needs is provided in a practical way: each module has all the material organised and ready to be used






I singoli elementi servomobili, grazie all'ausilio di ruote, divengono veri e propri elementi di supporto pronti ad essere posizionati a seconda delle esigenze operative o delle preferenze soggettive del professionista.

Thanks to the use of castors, each piece of furniture becomes a genuine support element ready to be positioned according to the operational needs or personal preferences of the healthcare professional.


MOBILI COMPONENTI

MODULAR CABINETS

MODELLI DI SERVOMOBILI SU RUOTE MOBILE DENTAL CABINET

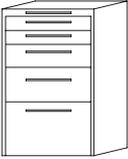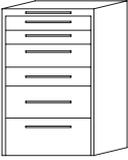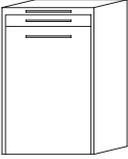
	Codice articolo Order code	Larghezza (mm) Width (mm)	Profondità (mm) Depth (mm)	Altezza (mm) Height (mm)	Cassetti Drawers	Anta Door
	DE9.31.4SO	500	475	810	4	
	DE9.31.5SO	500	475	810	5	
	DE9.31.6SO	500	475	810	6	
	DE9.32.1SO	500	475	810	1	●

VETRINETTA GLASS CABINET

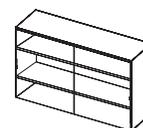

Codice articolo Order code	Larghezza (mm) Width (mm)	Profondità (mm) Depth (mm)	Altezza (mm) Height (mm)
DE0096	1000	300	500

MOBILE LAVABO CON TOP* CABINET WORKTOPS*

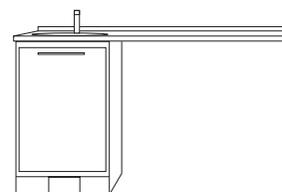

Codice articolo Order code	Lunghezza Top (mm) Worktop length (mm)	Profondità (mm) Depth (mm)	Altezza (mm) Height (mm)
WASHT20SO	2000	500	900
WASHT15SO	1500	500	900

*Specificare in fase d'ordine la posizione del lavabo DX o SX.

*Specify the position of washbasin on ordering.

CARTELLA COLORI COLOR CHARTS

	G39 - RAL 5024 Blu pastello Pastel blue		G14 - RAL 6018 Verde giallastro Yellow green
	G40 - RAL 5023 Blu distante Distant blue		G8 - RAL 1032 Giallo traffico Broom yellow
	G41 - RAL 5003 Blu zaffiro Saphire blue		G34 - RAL 3020 Rosso traffico Traffic red
	G37 - RAL 6027 Verde chiaro Light green		G18 - RAL 4006 Porpora Traffic purple

SIMPLE LINE

MOBILI DA STUDIO

CABINET FOR OPERATING ROOM



La linea di mobili è una linea semplice che nasce dall'esigenza di versatilità ed è ispirata ad un concept altamente qualitativo. È stata progettata per migliorare i movimenti di chi lavora, sintesi del vero concetto di ergonomia. I mobili sono realizzati con lamiera elettrozincata, omogenea e robusta grazie ad uno spessore 10/10; questi accorgimenti renderanno semplice e veloce l'eliminazione dello sporco, e contrasteranno la formazione di cumuli di polvere e altri residui nei micro avvallamenti. Il top è disponibile nella versione in vetro antigraffio o nella versione in laminato idrorepellente e antigraffio RAL9010. Le maniglie, in alluminio anodizzato, sono personalizzabili in otto colori.

Our range features top quality materials and simple designs for maximum versatility. Tecnomed cabinets are superbly ergonomic and designed to make the lives of working easier. Made from robust, electro-galvanised sheet steel in a uniform, 10/10 thickness, these cabinets are quick and easy to clean and designed to stop dust and debris building up in hollows and cracks. Worktops are available in two versions: scratchproof glass or water-repellent, scratch-proof laminate finished in RAL 9010. Choice of anodised aluminium handles in eight colours.



Le maniglie, in alluminio anodizzato, sono personalizzabili in otto colori.

The handles are in anodised aluminium and there is a choice of eight colours



I cassetti, montati su guide con cuscinetti in teflon, hanno un elevato grado di scorrevolezza e sono dotati di bacinelle in tecnopolimero, lisce o a scomparti, resistenti all'usura e all'invecchiamento.

The drawers, mounted on guides with Teflon bearings, offer effortless sliding and are equipped with technopolymer trays, either with or without compartments, that are resistant to wear and ageing.

CARTELLA COLORI COLOR CHARTS

	G39 - RAL 5024 Blu pastello <i>Pastel blue</i>		G14 - RAL 6018 Verde giallastro <i>Yellow green</i>
	G40 - RAL 5023 Blu distante <i>Distant blue</i>		G8 - RAL 1032 Giallo traffico <i>Broom yellow</i>
	G41 - RAL 5003 Blu zaffiro <i>Sapphire blue</i>		G34 - RAL 3020 Rosso traffico <i>Traffic red</i>
	G37 - RAL 6027 Verde chiaro <i>Light green</i>		G18 - RAL 4006 Porpora <i>Traffic purple</i>

SCHEDA PRODOTTO

PRODUCT DATA SHEET

Codice ordine	DE9.21DX	DE9.21SX	DE9.21DXV	DE9.21SXV	DE9.24DX	DE9.24SX	DE9.25DX	DE9.25SX
Top	Laminato	Laminato	Cristallo	Cristallo	Laminato	Laminato	Laminato	Laminato
Sottolavello	●	●	●	●	●	●	●	●
Cassettiera 4 scomparti	●	●	●	●	●	●	●	●
Servomobile 4 scomparti	●	●	●	●	●	●	●	●
Mobile antina	● 1 ripiano in vetro	● Con frigo	● Con frigo					
Lavello-materiale	Destra-ABS	Sinistra-ABS	Destra-cristallo	Sinistra-cristallo	Destra-ABS	Sinistra-ABS	Destra-ABS	Sinistra-ABS
Rubinetto leva clinica	●	●	●	●	●	●	●	●
Dimensioni top mm	2080 x 500 mm	2080 x 500 mm	2080 x 500 mm	2080 x 500 mm	2080 x 500 mm	2080 x 500 mm	2080 x 500 mm	2080 x 500 mm
Altezza da pavimento	900 mm	900 mm	900 mm					
Elettrovalvola					●	●	●	●
Garanzia	24 Mesi	24 Mesi	24 Mesi					
CE	●	●	●	●	●	●	●	●

Product code	DE9.21DX	DE9.21SX	DE9.21DXV	DE9.21SXV	DE9.24DX	DE9.24SX	DE9.25DX	DE9.25SX
Top	Laminate	Laminate	Glass	Glass	Laminate	Laminate	Laminate	Laminate
Washbasin cabinet	●	●	●	●	●	●	●	●
4 compartment drawer unit	●	●	●	●	●	●	●	●
4 compartment service unit	●	●	●	●	●	●	●	●
Full door unit	● 1 glass shelf	● with refrigerator	● with refrigerator					
Washbasin - material	Right - ABS	Left - ABS	Left - glass	Right - glass	Right - ABS	Left - ABS	Right - ABS	Left - ABS
Lever type medical tap	●	●	●	●	●	●	●	●
Worktop dimensions	2080 x 500 mm	2080 x 500 mm						
Height from floor	900 mm	900 mm						
Electrovalve					●	●	●	●
Warranty	24 months	24 months						
CE	●	●	●	●	●	●	●	●

VETRINETTE



GLASS CABINET

Per completare l'arredamento, le vetrinette sono indispensabili: pratiche e funzionali, facilitano un'organizzazione dello studio ordinata ed efficiente. Le vetrine proposte da Tecnomed sono caratterizzate da una solida e robusta struttura e dotate di vetri fumé a scorrimento e da due ripiani in vetro.

To complete the furniture Tecnomed Italia's glass cabinets are indispensable: these cabinets offer practicality and functionality, and facilitate efficient and orderly organization. The glass cabinets available, are characterized by a solid and sturdy structure, and equipped with sliding frosted glass panels and two glass shelf.

Codice articolo: DE0096

Order code: DE0096

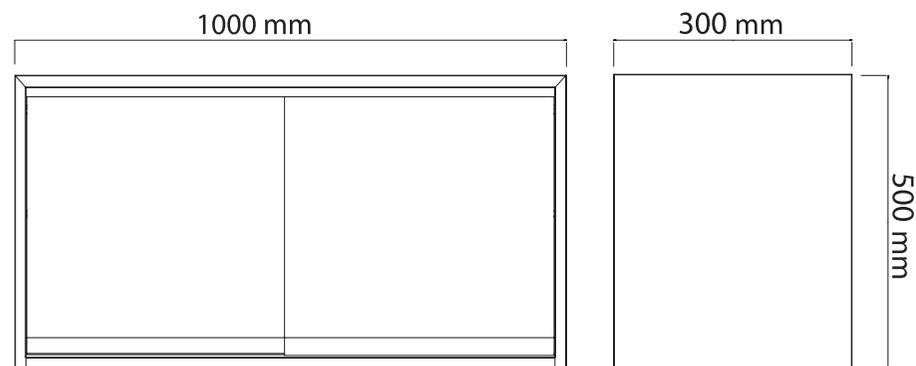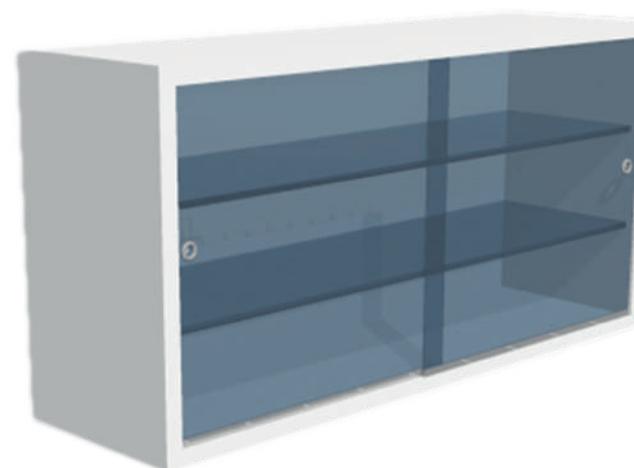



ACCESSORI

ACCESSORIES

Per completare al meglio la tua sala chirurgica, sono disponibili diversi accessori, che si coordinano perfettamente al resto dei prodotti, sia dal punto di vista estetico che dell'usabilità.

To make the most out of your operating room, there are several accessories that match just perfectly with the other products, both in terms of design and functionality.

CARRELLO ARMADIO CABINET CART

All'interno della linea Handy Surgery è possibile trovare anche il carrello portacontainer, completamente in acciaio Inox AISI 304 con finitura scotch-brite, struttura antiribaltamento e paracolpi rotanti in gomma agli angoli. Il sistema di chiusura frontale a scomparsa è dotato di maniglie di spinta, per facilitare la movimentazione del carrello. La doppia anta battente, con apertura a 270°, attraverso l'uso di una guarnizione siliconica perimetrale permette una chiusura ermetica totale.

Questa caratteristica consente il trasporto sia di materiali sterili, salvaguardandoli da un'eventuale contaminazione, ma anche di materiali non sterili. All'interno dell'armadio si trovano due ripiani fissi, anch'essi completamente in acciaio Inox AISI 304, che possono portare tre container da 1/1 unità di sterilizzazione (600x300x300mm) affiancati.

The Handy Surgery line also features the container cart, made completely from AISI 304 Stainless Steel with Scotch-Brite finish, anti-tip structure and revolving rubber bumpers at the corners.

The retractable front closing system is equipped with push handles, to facilitate the movement of the cart. The double hinged door, with 270° opening ensures hermetic seal by means of a perimeter silicone seal. This feature allows for the transport of both sterile materials, protecting them from possible contamination, and non-sterile materials.

Inside the cabinet there are two fixed shelves, also entirely in AISI 304 Stainless Steel, which can carry three containers of 1/1 sterilization unit (600x300x300mm), side by side.



Due ripiani fissi porta container in acciaio AISI304.
Two fixed container shelves in AISI 304 steel.





Chiusura con maniglia a scomparsa.
Hideaway handle closing system.



Quattro ruote piroettanti antistatiche e antiruggine di cui due con freno.
Four anti-static, streak-free casters, two of which are equipped with brakes.

SCHEDA PRODOTTO

PRODUCT DATA SHEET

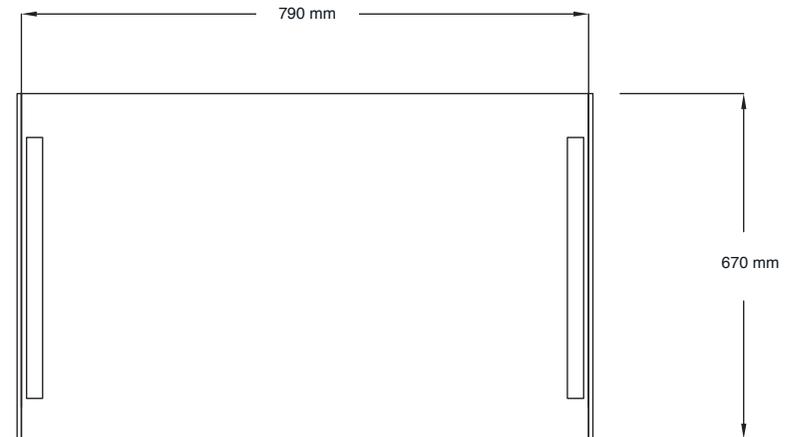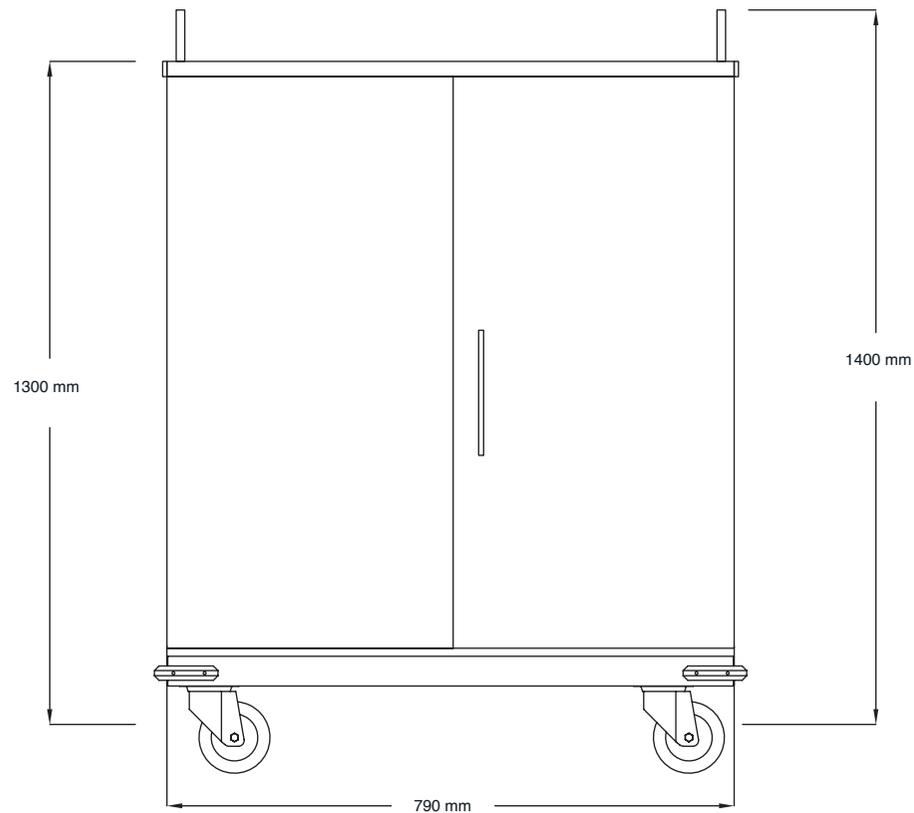

Codice articolo
Order code TM2104

Materiale <i>Material</i>	Acciaio inossidabile AISI 304 <i>AISI 304 Stainless Steel</i>
Larghezza (mm) <i>Width (mm)</i>	790
Profondità (mm) <i>Depth (mm)</i>	670
Altezza (mm) <i>Height (mm)</i>	1400
Ruote antistatiche <i>Antistatic wheels</i>	●

CARRELLO ANESTESIA

ANAESTHESIA CART


Un carrello anestesia deve essere pulito per ogni evenienza, rifornito di tutto quanto necessario in modo ordinato. Interamente realizzato in acciaio inossidabile AISI 304, il carrello anestesia di Handy Surgery non lascia nulla al caso: con sei cassetti, anta laterale a due ripiani e un ripiano aperto, ha tutto ciò che serve per mantenere l'ordine. È inoltre dotato di sistema di chiusura a chiave che blocca i cassetti e l'anta laterale. I vari compartimenti e cassetti permettono un'organizzazione in funzione della specifica area di lavoro; l'ordine e la logica devono essere ferree al fine di un uso adeguato. Il carrello è dotato di quattro ruote snodate per facilitare gli spostamenti; il piano superiore è bordato sui quattro lati per un trasporto sicuro degli oggetti.

An anaesthesia cart must always be sanitized and prepared, filled with everything you need in an orderly manner. Made entirely of AISI 304 Stainless Steel, the Handy Surgery anaesthesia cart leaves nothing to chance: with six drawers, a side door with two shelves and an exposed shelf, it has all you need to keep everything in good order. It also features a key lock system that locks the drawers and the side door. The various compartments and drawers allow you to organize everything based on each specific work area; order and logic must prevail to ensure proper use. The cart is equipped with four casters to facilitate movement; the upper shelf edge is protected on all four sides for safe transport of objects.



Ampia area di appoggio superiore bordata sui quattro lati per un trasporto sicuro degli oggetti.

Large worktop with edge protected on all four sides for safe transport of objects.

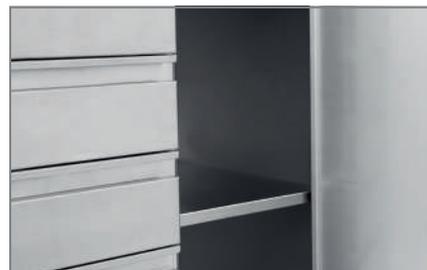



Ripiano fisso in acciaio AISI304.

Fixed shelf in AISI 304 steel.



SCHEDA PRODOTTO

PRODUCT DATA SHEET

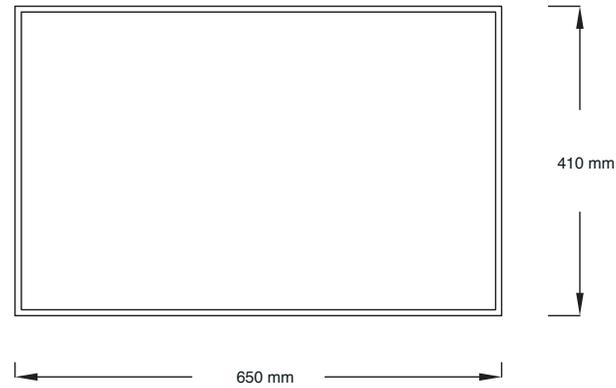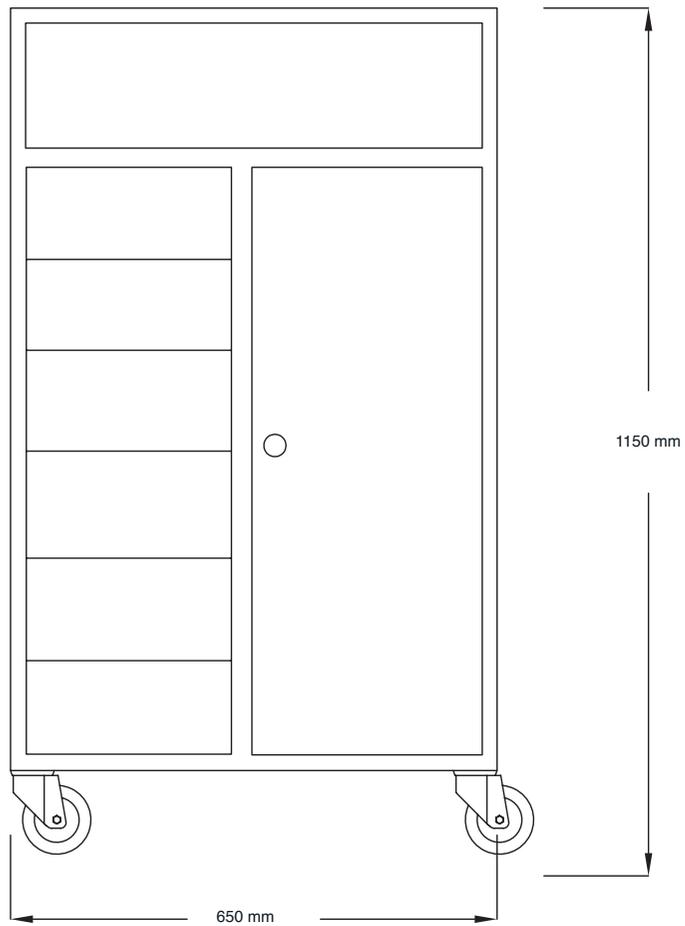

Codice articolo
Order code

TM5007

Materiale
Material

Acciaio inossidabile AISI 304
AISI 304 Stainless Steel

Larghezza (mm)
Width (mm)

650

Profondità (mm)
Depth (mm)

410

Altezza (mm)
Height (m)

1150



CARRELLO SERVITORE

L'ampio carrello servitore, proposto da Tecnomed Italia, è dotato di quattro ruote piroettante di cui due con freno. Esso ha una struttura saldata ed interamente in acciaio inox, con fiancate in tubo tondo.

SERVICE CART

The large service cart designed by Tecnomed Italy, comes with four casters, two of which are equipped with brake. It has a welded body and is made entirely from Stainless Steel, with sides in round tube.

Carrello servitore 3 ripiani 1000x500x935 mm.

Codice articolo: DE1005X

3-shelf utility cart 1000x500x935 mm .

Order code: DE1005X



CARRELLO PORTA-SACCO

Carrello porta-sacco, utilissimo per i prodotti di scarto che se non smaltiti immediatamente andrebbero ad occupare superfici di appoggio dello studio; grazie ad uno smaltimento immediato invece, lo studio risulta sempre in ordine, anche durante le procedure, e vengono inoltre ridotti i tempi di riorganizzazione tra un paziente e l'altro. Il carrello porta-sacco è dotato di 3 ruote piroettanti.

BAG HOLDER CART

Bag holder cart, useful for waste products that if not disposed of immediately would occupy the worktops of the practice; an immediate disposal instead, ensures that the practice is always in perfect order, even during procedures, and it also reduces the time of reorganization between a patient and the next. The bag holder cart is equipped with 3 casters.

Carrello portasacco inox (coperchio non disponibile).

Codice articolo: TM5042/1

Stainless steel bag cart (no lid available).

Order code: TM5042/1

